

Prøvetagning med kanyle

Blodprøvetagning, hvor kanyle og sikkerhedsholder samles umiddelbart inden prøvetagning.



Varenummer: 450076

Varenavn: Kanyle 21Gx11/2" uden holder Grøn

Varenummer: 450075

Varenavn: Kanyle 22Gx11/2" uden holder Sort

Varenummer: 450230

Varenavn: Quickshield Kanyleholder

Vejledning i prøvetagning med kanyle

- 1 Udløbsdato på prøverør kontrolleres.
- 2 Patienten identificeres ved, at vedkommende selv siger sit navn og cpr-nr.


- 3 Inden prøvetagningen og i patientens nærhed, mærkes prøverørene med strekkoder.

Husk, at glas skal tages i [Region H's anbefalede prøvetagningsrækkefølge](#).




- 4 Patienten bedes strække armen ud og slappe af i hånden.
- 5 Patienten må ikke pumpe med hånden før og under prøvetagningen.
- 6 Punkturstedet, der ofte er i albuebøjningen, findes.
- 7 Patientens albuebøjning og prøvetagerens pegefinger aftørres med en spritserviet, eller en vattampon fugtet med hospitalssprit. Al alkohol skal være fordampet, inden indstikket foretages.

-
- 8 Tag en kanyle og kanyleholder. Drej den grå del af kanylebeskytteren af.

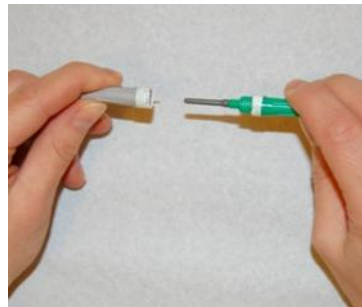

-
- 9 Vend prikken på kanylen mod sikkerhedsskjoldet på kanyleholderen.

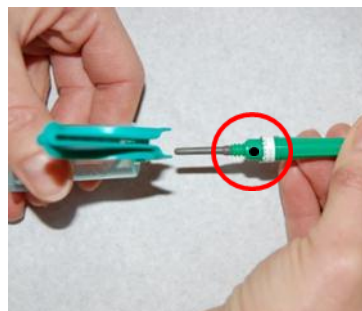

-
- 10 Drej kanyleholderen, indtil kanylen er skruet fast.



-
- 11 Hvis det er nødvendigt, anlægges let stase med et stasebånd eller en gummislange.

-
- 12 Hætten fjernes fra kanylen med én hånd ved at lade hætten falde lodret ned for at undgå, at kanylespidsen bøjes.



-
- 13 Foretag indstikket med kanylespidsens slibeflade opad og med en indstiksvinkel på ca. 30 grader. Dette opnås bedst ved at placere pegefingeren mellem patientens arm og kanyleholderen.



-
- 14 Så snart kanylen er på plads i venen, føres prøvetagningsrøret ind i holderen, hvor proppen perforeres af bagkanylen. For at undgå at kanylen skubbes længere ind i patientens vene ved påføring af prøvetagningsrør, bruges den anden hånd til at støtte holderen og derved holde igen på kanylen.



-
- 16 Når blodet løber, løsnes stasen.

-
- 17 Prøvetagningsrørene fyldes til fyldningsmærket, som svarer til firkanten/trekanten på rørets label.

-
- 18 Når blodprøvetagningen er udført, stasen er fjernet, og det sidste rør er trukket ud af holderen, holdes en ren vattampon parat over indstiksstedet, mens kanylen trækkes ud af venen. Vattamponen presses herefter mod indstiksstedet med den ene hånd, mens sikkerhedsskjoldet med den anden hånds tommelfinger skubbes ned over kanylen, til der høres et klik.



-
- 19 Få patienten til at bøje armen, så der klemmes sammen om vattet.

-
- 20 Kanylen og holderen kasseres samlet i en godkendt beholder til smittefarligt affald.



-
- 21 Straks efter prøvetagning vendes alle rør minimum 10 gange. Én vending svarer til, at røret vendes med *proppen op* – *proppen ned* – *proppen op*. Det er vigtigt, at røret vendes helt i bund og ikke rystes.

I tilfælde, hvor rørene ikke bliver helt fyldt, er det nødvendigt hurtigst muligt, og helst inden rørene vendes, at udløse det resterende vakuum for at *undgå hæmolyse*. Dette gøres nemmest ved at punktere proppen igen med en bagkanyle. Kanylen kasseres.

Citratrør (blå prop) til koagulation skal altid fyldes korrekt. Proppen må ikke tages af røret og sættes på igen eller punkteres med en bagkanyle, da dette kan medføre, at prøveresultatet bliver forkert.

Der må aldrig overføres blod fra et rør til et andet.

-
- 22 Kontrollér, at blødningen er stoppet, og fastgør vattamponen med plaster.

-
- 23 Alle blodprøver placeres herefter i termoskab.
-