



Borgerløsning

Du er nu ude hos den nye borger, som opstarter i det telemedicinsk KOL-forløb.

Du har medbragt egen PC samt borgerens tablet, ilt-måleren.

Du hjælper borgeren med at logge på Telma-løsningen og gennemgår et spørgeskema sammen med vedkommende, så borgeren er tryk i anvendelsen.

Du viser også borgeren, hvordan man kan skrive beskeder til behandlerteamet.

1. Log ind med borgerens MitID fra din login-seddel og vælg efterfølgende en pinkode.

Tryk på "Log på"




Log ind med borgeren under MitID

! Du skal i uddannelsesmiljøet vælge fanen "Test-login".

Tryk derefter "Forsæt"

Forsæt godkendelsesflowet på borgerens egen telefon ved at trykke "Åbn app på anden enhed".

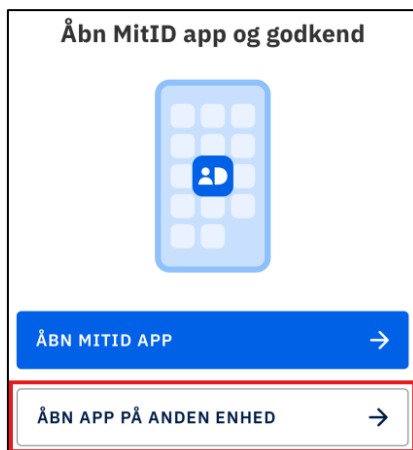

Herefter vælger borgeren en fir cifret pinkode, som skal skrives to gange i træk.

Vælg pinkode				Bekræft pinkode			
Vælg en pinkode du kan huske				Indtast pinkode igen			
1	2	3		1	2	3	
4	5	6		4	5	6	
7	8	9		7	8	9	
	0	slet			0	slet	

Derefter skal borgeren bruge sin fir cifret kode til at logge ind i Telma.

Borgerløsning

Hej

Tast din PIN-kode på 4 cifre for at logge ind.

Glemte PIN-kode?

Pinkode

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	slet

2. Udfør dagens aktiviteter og tilføj en kommentar på en af målingerne. Obs. Borgerens navn vil fremgå efter "Hej" øverst på siden.

Borgeren lander automatisk på fanen "Dagens aktivister" ved start af Telma.

Hej

Dagens aktiviteter 1

Valgfrie aktiviteter 3

Følg derefter vejledningen igennem spørgeskemaet for at udfylde "Dagens aktivitet".

Evt. Forsøg gerne at springe nogle af trinene over og prøv at klikke frem og tilbage i planerne.

Under aktiviteterne er der både introduktioner, målinger, spørgsmål og kommentarfelt. Undervejs skal der trykkes "Videre" for at komme til næste del af aktiviteten, det er også muligt at "Springe over" og trykke "Tilbage".

Tilbage

Spring over

Videre

De fleste aktiviteter er spørgsmål eller introduktionstekst, spørgsmålene besvares ved at trykke på valgmulighederne i højre side og ved introduktionerne trykkes "Videre", når teksten er blevet læst.

Nogle aktiviteter kan udføres med saturationsmåler, her vil målingerne overføres sig til skærmen. Hvis der er koblet Bluetooth til saturationsmåleren, kommer resultaterne fra den automatisk ind på aktiviteten. Hvis der ikke er Bluetooth, skal målingerne indtastes manuelt, ved at vælge "Indtast" og indtaste de resultater der står på saturationsmåleren. Efterfølgende vælges "Tilføj".

Nogle aktiviteter kan borgeren tilføje kommentarer til, her vil "Tilføj kommentar" kunne vælges på skærmen. Herefter kan borgeren indsætte en kommentar.

Iltmætning og pulsmåling

Sæt iltmåleren på fingeren og mål din iltmætning og puls. Overføres målingen ikke automatisk, skal du vælge at indtaste målingen manuelt.

Tryk på "indtast" for at få tastaturet frem

Når de korrekte målinger ses i feltet, tryk på "videre"



+ Tilføj kommentar

Indtast resultater for 2 målinger

Iltmætning — %SpO₂

Indtast

Puls — Slag/min

Indtast

Tilbage

Spring over

Videre

Når alle aktiviteter er gennemgået og indsendt, vælges "Afslut".

3. Udfør et par af de valgfrie aktiviteter

Hvis der er tildelt ikke skemalagte aktiviteter, ses disse under "Valgfrie aktiviteter". De samme planlagte skemaer ligger også under valgfrie aktiviteter, derover ligger der målingsskemaer, hvor det er muligt for patienten at indsende en specifik måling til Telma.

Hej

Dagens aktiviteter 1

Valgfrie aktiviteter 3


4. Skriv en besked til behandlerteamet, fx for at aftale næste videomøde
Borgeren kan sende en besked til sit behandlerteam ved at vælge fanen "Beskeder"

Resultater

Beskeder

Om appen


Borgen skal vælge beskeden fra behandlerteamet og trykke "Se beskeder". Det er muligt at besvare beskeden derefter.

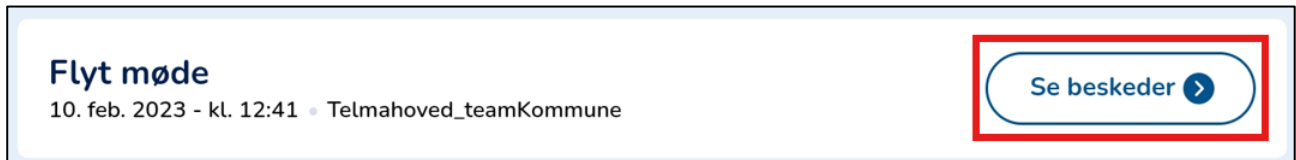

Flyt møde
10. feb. 2023 - kl. 12:41 • Telmahoved_teamKommune

Se beskeder ➔

Borgeren kan også vælge at oprette en ny besked, ved at vælge "Opret ny besked".

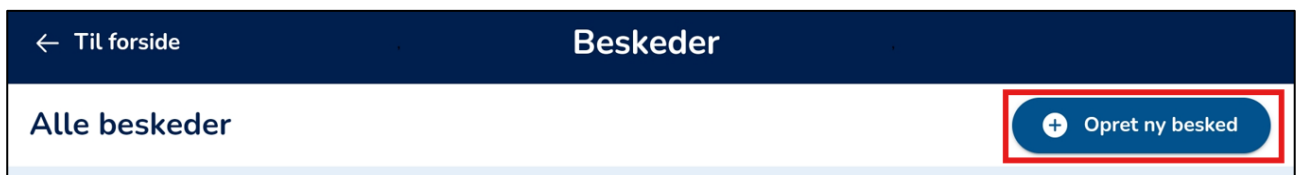


← Til forside **Beskeder**

Alle beskeder

+ Opret ny besked

Vælg herefter det behandlerteam borgeren ønsker at skrive til.

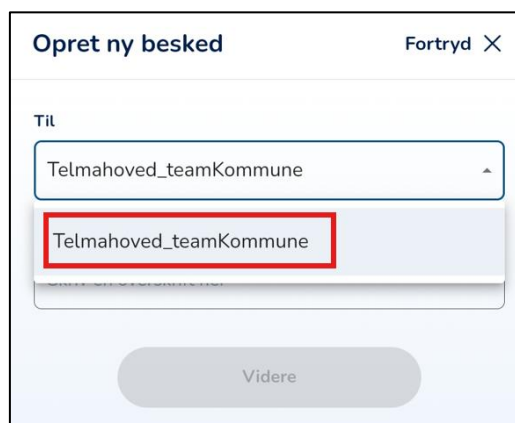

Opret ny besked Fortryd ✕

Til

Telmahoved_teamKommune

Telmahoved_teamKommune

Videre

Skriv en kort overskrift og tryk "Videre".




Opret ny besked Fortryd ✕

Til

Telmahoved_teamKommune

Overskrift

Skriv en overskrift her

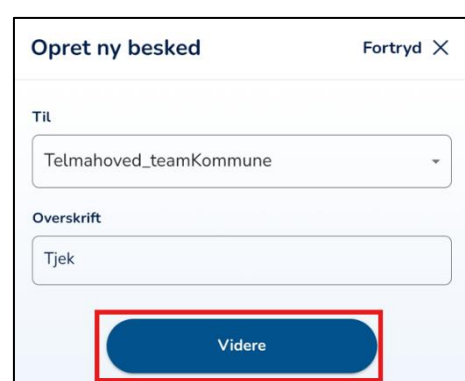

Opret ny besked Fortryd ✕

Til

Telmahoved_teamKommune

Overskrift

Tjek

Videre

Herefter kan borgeren skrive sin besked til behandlerteamet.




Derefter vil borgeren kunne følge med i samtalen imellem behandlerteamet og borgeren herinde.

5. Glemt kode

Hvis borgeren har glemt sin pinkode, trykkes der på "Glemt PIN-kode" på forsiden.

Når der er trykket en gang på "Glemt PIN-kode" kan handlingen ikke omgøres og borgeren skal herefter logge ind med MitID igen ligesom første gang.

Glemt PIN-kode kan også aktiveres ved at koden vælges forkert tre gange i træk.

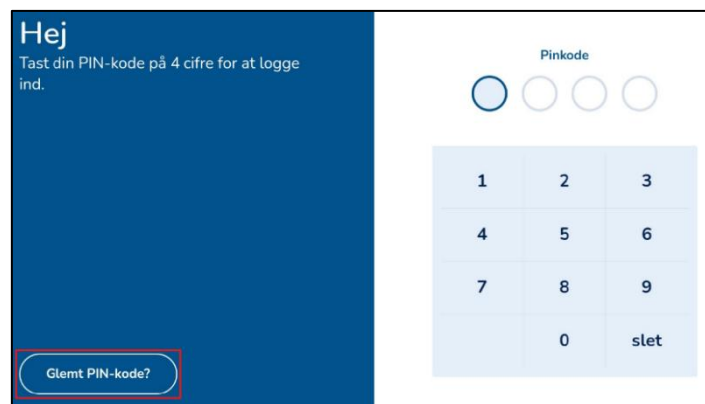

Derefter vil forsiden af Telma fremgå og der skal nu logges ind på ny ved at trykke på "Log på".

