

Guide til kliniker

Telma på borgers eget device

Til nyoprettet borgere og borgere der skal overflyttes fra kommunalt/regional tablet til borgers eget device



Sådan får du opsat borgeren med Telma på borgers eget device

Indholdsfortegnelse

Trin 1: Inden mødet med borgeren	3
Trin 2: Forberedelse før Telma appen hentes	3
Trin 3: Download Telma appen.....	5
Trin 4: Opsætning før log på.....	7
Trin 5: Forbind måleudstyr	8
Trin 6: Første log på.....	12
Trin 7: Inde i appen.....	14
Trin 8: Efter Telma-appen er hentet.....	15
Sæt måleudstyr i parringstilstand	16
Blodtryksmåler A&D UA-651BLE.....	16
Pulsoximeter Nonin 3230.....	16
Glemte pinkode	16

Trin 1: Inden mødet med borgeren

1. Sikre at borger medbringer sit device (smartphone eller tablet), MitID og kode til Apple-ID eller Google-konto (Hvis de bruger Fingeraftryk eller Ansigtsgenkendelse til deres Apple-ID eller Google-konto, er det også fint) til mødet.
-
2. Medbring måleudstyr, som borgeren skal låne til indtastning i Telma
-
3. Opret forløb for borgeren
-

Trin 2: Forberedelse før Telma appen hentes

1. Tjek at devicet (smartphone eller tablet) har internet (Wi-Fi eller mobilnetværk).

Hvis borgeren er i eget hjem: Apple iPhone (Wi-Fi)

Tjek Wi-Fi ved at vælge 'Indstillinger' → 'Wi-Fi' → Tjek Wi-Fi er slået til og har forbindelse til borgerens eget Wi-Fi


Hvis borgeren er i klinik: Apple iPad (Wi-Fi)

Tjek Wi-Fi ved at vælge 'Indstillinger' → 'Wi-Fi' → Tjek Wi-Fi er slået til og har forbindelse til lokationens Wi-Fi



Hvis borgeren i klinik: Apple iPhone (Mobilnetværk) eller

Tryk på 'Indstillinger' → 'Mobilnetværk' → Tjek Mobildata er slået til med grøn markering

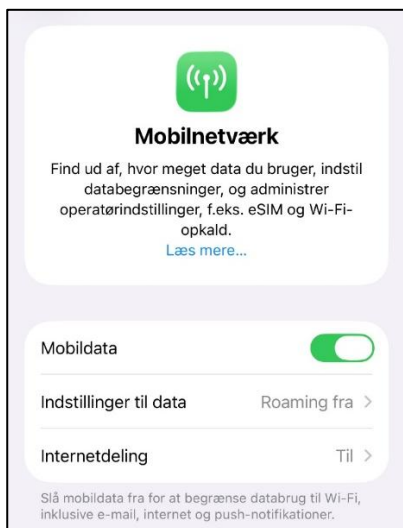

Hvis borgeren er i eget hjem: Android (Wi-Fi)

Tjek WIFI (Borgeres eget hjem): Indstillinger → Forbindelse → WIFI → Tjek WIFI er slået til og har forbindelse til borgerens eget WIFI

Hvis borgeren er i klinik: Android tablet (Wi-Fi)

Tjek WIFI (Borgeres eget hjem): Indstillinger → Forbindelse → WIFI → Tjek WIFI er slået til og har forbindelse til lokationens WIFI



Hvis borgeren i klinik: Android (Mobilnetværk)

Tryk på 'Indstillinger' → 'Forbindelse' → 'Databrug' → Tjek at Mobile data er slået til med blå markering



Trin 3: Download Telma appen

OBS. Hold gerne hånden over den QR-kode der ikke skal bruges. På Apple iOS kan den ikke fremsøges, der skal bruges QR-kode. Det er muligt at fremsøge appen på android.

Apple iOS

Download Telma appen via denne QR-kode. Åbn kameraet, hold telefonen over og tryk på og følg linket der bliver vist:




Android

Download Telma appen via denne QR-kode. Åbn kameraet, hold telefonen over og tryk på og følg linket der bliver vist:




Tryk hent, indtast apple-id eller google play kode (kan bruge fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, hvis det er aktiveret) og installer.

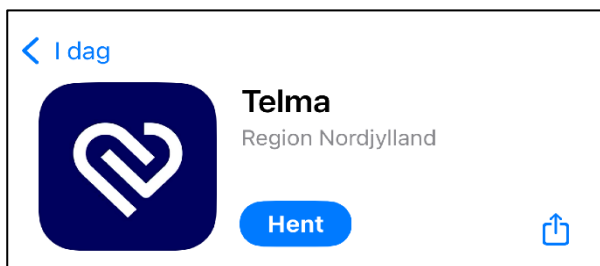


Trin 4: Opsætning før log på

1. Hvis billedet er liggende og ikke stående tryk på 'Roter'-knappen øverst til højre på loginskærmen for at vende den rigtigt. Hvis billedet står

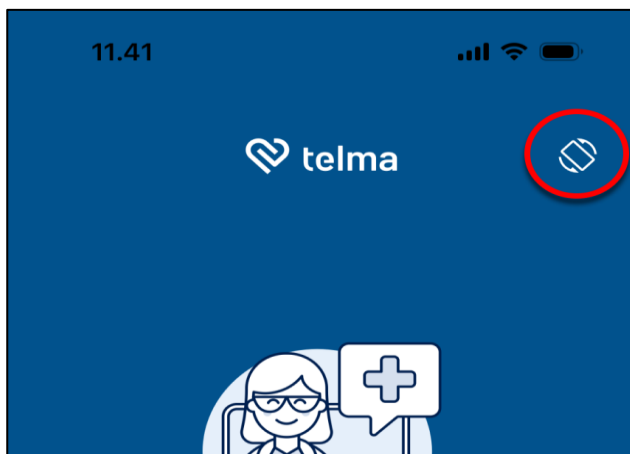


2. Vælg derefter 'Mobiltelefon' og tryk 'Gem'.

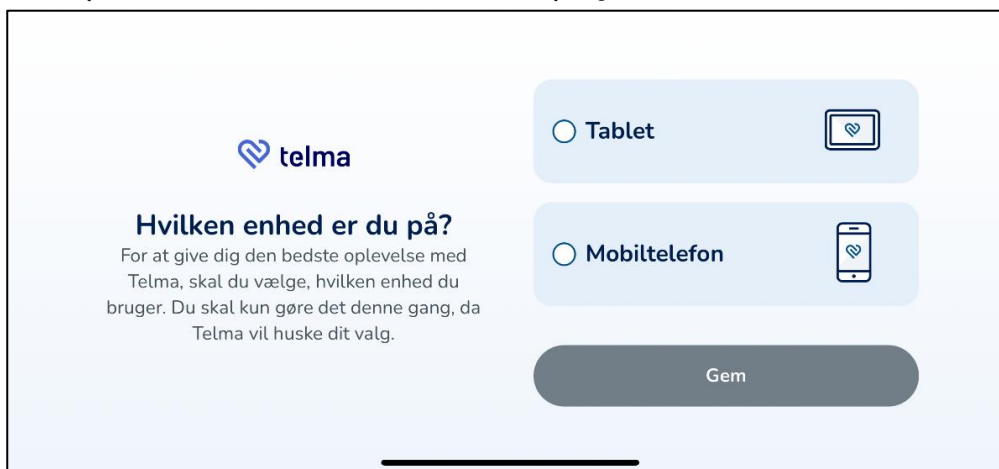

Trin 5: Forbind måleudstyr

1. Tryk på 'Forbind måleudstyr'.

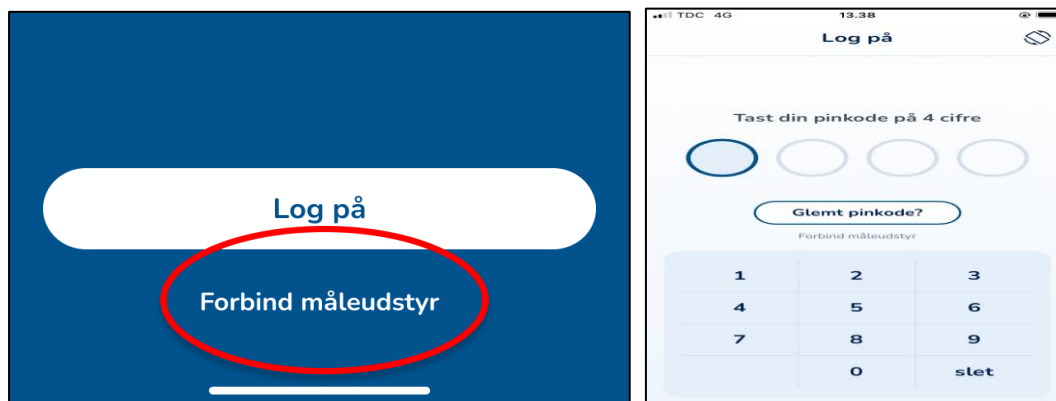

2. Herefter vises en boks, hvor man skal bekræfte om man ønsker at fortsætte opsætningen af udstyret. Tryk på knappen 'Ja, fortsæt'.



Giv herefter tilladelse til at Telma må finde, oprette forbindelse til og fastslå relative placeringer af enhederne i nærheden.

3. Giv bluetooth-tilladelse


- Ved at trykke 'Tillad', når appen spørger om tilladelse til at bruge bluetooth. På Android kan det hedde 'Enheder i nærheden'.



- Hvis bluetooth ikke er aktiveret
 - Apple iphone: Indstillinger → Bluetooth → Aktiver Bluetooth
 - Android: Indstillinger → Forbindelse → Aktiver Bluetooth

4. Sørg for at måleapparatet er i parringstilstand. Når apparatet er klar, ses det på 'Opdagede enheder'.


Apple iPhone:

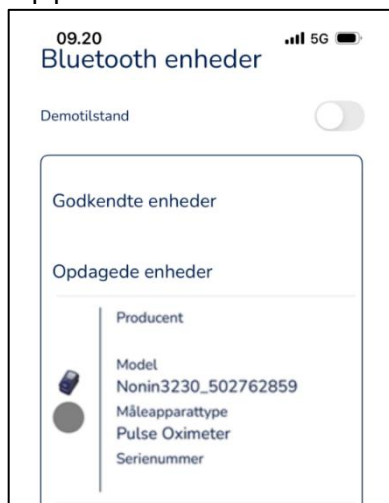


Android:



5. Vælg apparatet fra 'Opdagede enheder' og tryk 'Godkend enheden'. Derefter flyttes apparatet til listen "Godkendte enheder".

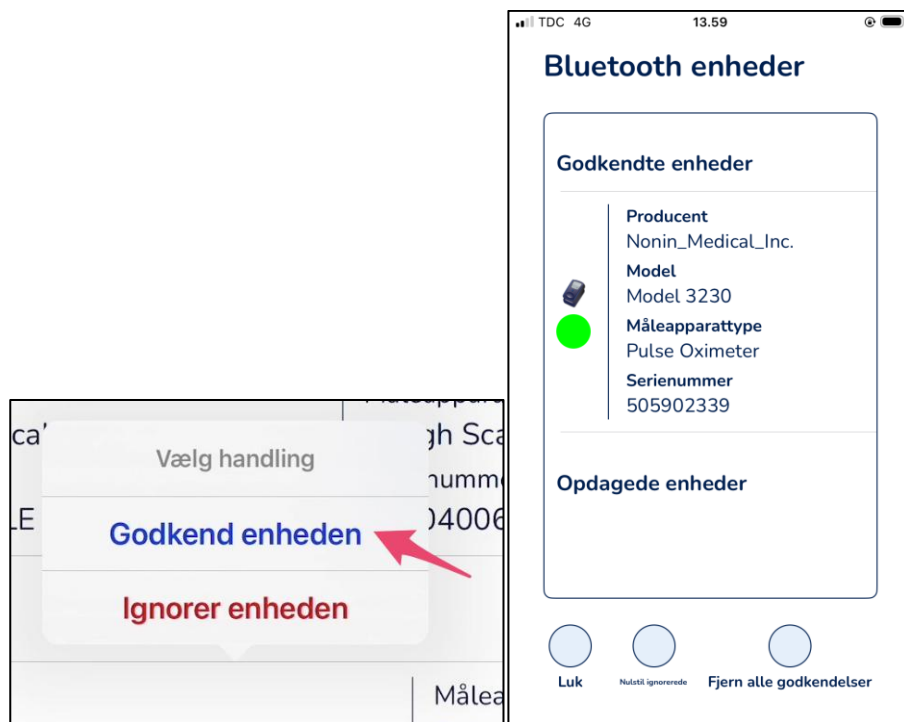


-
6. Hvis du bliver spurgt, om du vil oprette parring, tryk på 'Par' (Android) eller 'Par' (iPhone).

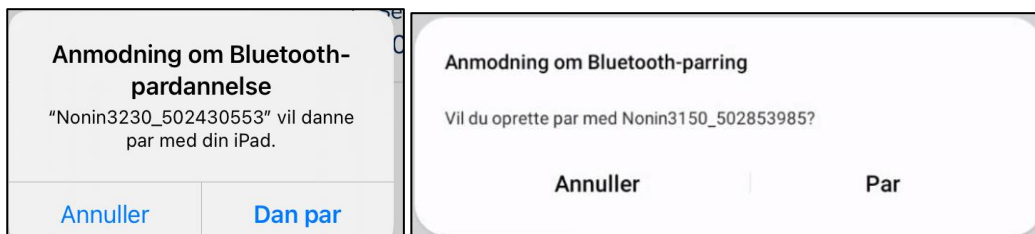

-
7. Tryk på apparatet i listen 'Godkendte enheder' og vælg 'Abonner på data' for at lave en testmåling med det valgte måleudstyr. På blodtryksapparatet står der 'SET', når det skaber forbindelse og 'END', når forbindelsen er gennemført.




8. Derefter fremkommer en beskrivelse af, at Telma har modtaget data, hvilket betyder at, apparatet er korrekt opsat. Afslut med 'Afbryd'.

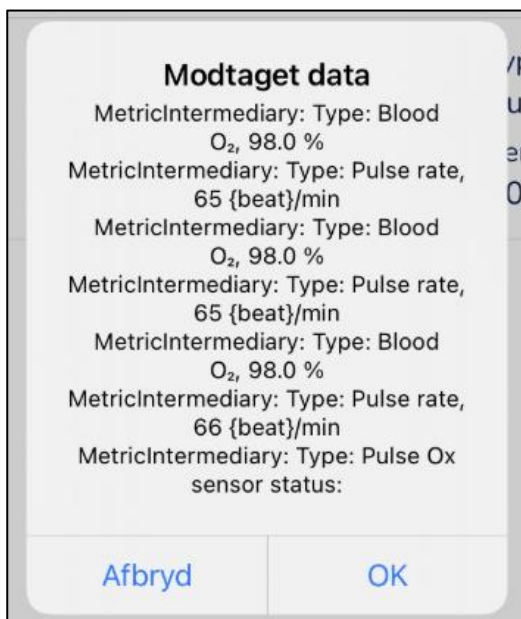


Trin 6: Første log på

1. Vælg 'Log på'

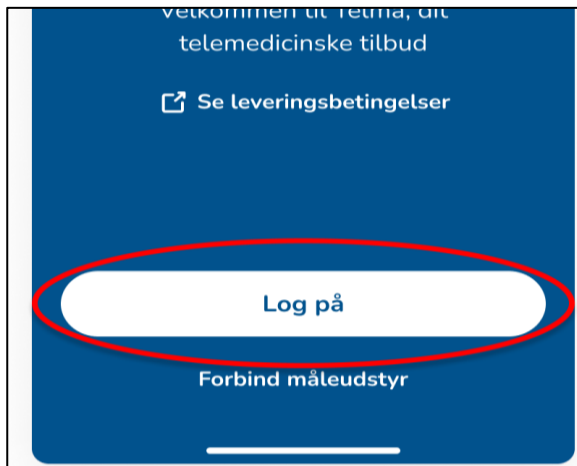

2. Vælg 'Fortsæt til login' for at logge på med MitID

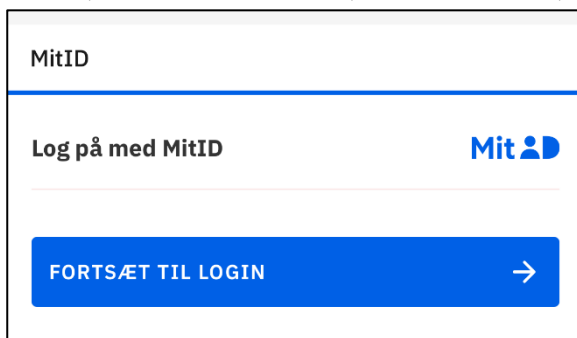

Indtast Bruger-ID og godkend i MitID Appen.

Hvis borger ikke har MitID på telefonen, men fx kun på sin computer, kan man vælge 'Åbn MitID på en anden enhed'



3. Når du har godkendt med MitID, skal du vælge en pinkode i Telma appen og bekræfte den.

9:41

Vælg pinkode

Vælg en pinkode du kan huske

Four circular indicators for the PIN code: the first is solid dark blue, the second is a light blue outline, and the third and fourth are white outlines.

1	2	3
4	5	6

9:41

← Bekræft pinkode

Indtast koden igen

Four circular indicators for the PIN code: the first is solid dark blue, the second is a light blue outline, and the third and fourth are white outlines.


1	2	3
4	5	6

Trin 7: Inde i appen

1. Her kan dagens aktiviteter ses, hvor aktiviteterne i borgerens plan fremgår.

Der er en pil nederst, som viser, at der ligger flere aktiviteter.

Til højre kan 'Valgfrie aktiviteter' tilgås.

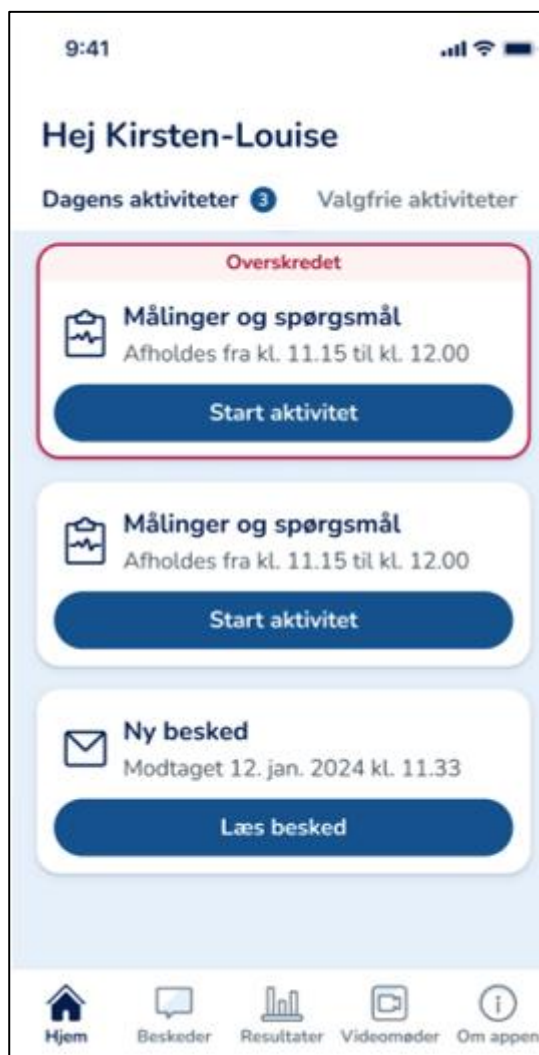

2. Prøv sammen med borgeren at udfylde spørgeskemaer, målinger, skriv en besked til behandlerteamet.

3. Afhold et videomøde med borgeren, så det sikres at lyd og video er aktiveret i appen. Første gang der tilgås videomøde, skal lyd og video aktiveres. Tryk "Tillad" på Iphone og Tryk "Mens appen bruges" på android.

Trin 8: Efter Telma-appen er hentet

Udfyld pilotafprøvningens 'Dataindsamlingsskema' DEL 2 sammen med borgeren og send til Mathilde Elsig på ay7d@kk.dk.

Sæt måleudstyr i parringstilstand


Blodtryksmåler A&D UA-651BLE

Hold **START**-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil displayet viser **Pr**.
Nu er apparatet klar til parring.



Pulsoximeter Nonin 3230

Tænd apparatet. Det er klar til parring, når Bluetooth-ikonet er **hvidt**.
Hvis ikonet er **grønt**, er det allerede forbundet til en anden enhed.

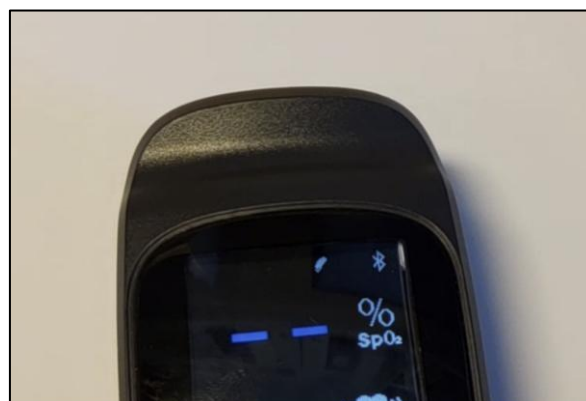

Glemt pinkode

Ved glemt pinkode tryk på 'Glemt adgangskode' og tryk 'Vælg ny kode'.

Log på med MitID og vælg en ny pinkode som beskrevet i trin 6.

9:41

Log på

Tast din pinkode på 4 cifre

● ○ ○ ○

Glemt pinkode?

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	slet

9:41

← Log på

Tast din PIN-kode på 4 cifre

● ○ ○ ○

Har du glemt din pinkode?

Hvis du har glemt din kode, skal du logge på med MitID igen og oprette en ny kode.

Vælg ny kode

Annuller